

医用电子体温计

绿萌儿童体温贴

使用说明书



绿萌 LMENG®


目录

产品清单	1
产品规格	2
产品使用	3、4、5
注意事项	6、7、8
故障处理	8、9
产品分类	9
免责声明	9、10
售后服务	10、11、12

适用范围：本产品供家庭和医疗部门测量人体（口腔）
体温使用

禁忌症：口腔有破损者禁用，对于不锈钢材质或塑料材质过敏患者禁用

产品清单

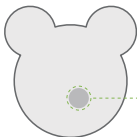

传感器

1



2

说明书

3

1. 体温贴

2. 胶贴

3. 说明书

扫码下载儿童体温贴APP



产品规格

产品名称：医用电子体温计

产品型号：LM_MED_B 002

产品尺寸：32.8x32.8x6.8mm

产品重量：xx

适用范围：该产品供医疗部门或家庭作测量儿童腋下
体温使用

测量范围：25.0~45.0℃

测量精度：±0.1℃

电源类型：CR1220 纽扣电池

工作温湿度范围：5~40℃≤85%

工作大气压：70kPa~106kPa

贮运温湿度范围：—20℃~55℃ ≤ 93%

支持接收设备：iOS8.0及以上，Android5.0及以上

品 牌 商：绍兴守仁医疗健康科技有限公司

生产商名称：xx

生产商地址：xx

售后电话：0575-88136975


其他内容详见说明书

产品使用



1. 扫码绑定

扫码下载APP，取出体温贴
按照APP提示绑定

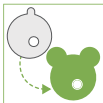

2. 撕开胶贴

将胶贴贴在体温贴的反面
(有测温点) 的一面



3. 开始测温

将体温贴贴至宝宝腋下并夹紧
开始测温



4. 放回关机

使用完毕，放回收纳盒
体温贴自动关机

产品使用

APP使用

温度监测



温度曲线



高温提示




服药记录



产品使用

更换电池


从收纳盒内拿、放设备时，如若发现设备指示灯未闪烁说明电池电量不足，请及时更换

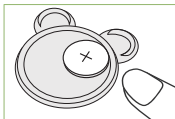


清洗消毒


- 1.使用完毕后,请使用75%的医用酒精擦拭体温贴,切忌采用高温消毒
- 2.请勿让体温贴接触化学溶剂或稀释剂等带有腐蚀性的液体
- 3.若不慎溅到或落入清水,应迅速取出电池,擦干表面,于干燥通风处放置2小时以上,验证是否被损坏
- 4.请勿使用超声波来清洁体温贴

注意事项

 **警告** 表示错误使用时有发生人员死亡或重伤可能性的内容


 **注意** 表示错误使用时有发生人员死亡和物品损坏
※可能性的内容
※物品损坏是标识有关房屋、家产及家畜、宠物相关的损坏

 表示强制
(必须遵守的事情)


 表示禁止
(不允许做的事情)

 B型应用部分

 注意
(包括警告危险)

 使用前请
参阅说明书

 不可随意丢弃

-  1. 请勿在易燃的环境中使用，有引发火灾或爆炸的可能性
2. 请勿大力撕咬产品，可能造成产品故障，若发生吞食情况，请马上与医生联系
3. 请勿在靠近强电磁场、电磁波及磁铁的环境中使用，有造成测量误差或产品损坏的可能性
4. 请勿将产品置入沸水煮沸杀菌，有造成产品故障或产品损坏的可能性
5. 请勿拆卸、修理和改造产品，有导致测量误差或引起产品损坏的可能性

注意事项

6. 请勿将体温计靠近或置于高温处，且不可接触任何化学溶剂
7. 测量部位仅限于腋下，请勿将腋下以外的部位用于体温测量，注意：测量者的姿势以及身体状况会影响体温测量



1. 请勿将体温计用于测量除人体温度以外的其他温度
2. 若体温计超过3个月不使用，请取出电池
3. 粘贴后如感觉不适(不舒服或者过敏)，请立即停止使用并咨询医生
4. 撕开胶贴保护膜后，胶贴不能沾染尘土等杂物
5. 粘贴前请先清洗腋下，保证体温贴能够紧密贴合皮肤，且测温点位于腋窝中央，否则会影响体温数据准确性
6. 使用手机作为接收设备进行体温检测时，请注意不要关闭蓝牙，并保持手机电量充足
7. 测量时使手机与体温计保持不超过10米的距离，并且无重大障碍物遮挡，否则会影响测量效果
8. 胶贴为一次性使用产品，使用时长超过8小时应更换新的胶贴 注意：请使用制造商提供的胶贴
9. 产品对病人的体温测量仅为辅助作用，请医生结合临床表现和症状做出诊断
10. 绿萌儿童体温贴产品符合防吞咽标准，但因体积较小，为保证孩童发生误吞食现象，6岁以下孩童不可独立使用，若发生吞食，请及时就医

注意事项



1. 体温计内部含有电池，废弃后请依照居住地的有关环境保护的规定进行处理

存储要求: 存储在无腐蚀气体和通风良好的室内

环境温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ 相对湿度: $\leq 85\%$

运输要求: 运输过程应防止重压变形、硬物刮蹭及雨雪或液体污渍浸淋

故障处理

故障现象	原因分析	排除方法
无法开机(从收纳盒拿出体温贴指示灯没闪烁)	电池没电	更换电池，如仍无法开机请联系客服
提问数据不稳定	使用方法有误	查看体温贴是否置于“产品使用”中所述的正确位置
无法连接手机APP	1. 手机蓝牙未开启 2. 产品电量过低	1. 请确认手机蓝牙开启 2. 更换电池后重新尝试连接 如无法连接请联系客服

产品分类

- 1.按防电击类型分类：内部电源；
- 2.按照防电击程度分类：B型；
- 3.按在与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气体情况下使用时的安全程度分类：不能在与空气混合的易燃麻醉气或氧或氧化亚氮的易燃麻醉气情况下使用的设备；
- 4.按照医疗器械产品管理分类属于“6820普通诊察器械”，管理类别Ⅱ类；
- 5.按照运行模式分类：连续运行设备；
- 6.按照制造商推荐的消毒，灭菌方法分类：由制造商推荐清洁消毒

免责声明

- 为了保护您的合法权益，请您在使用本产品前务必仔细阅读产品说明书、快速使用指南，并严格按照说明使用本产品，浙江无我科技有限公司保留对上述文档更新的权利。
- 一旦开始使用本产品，即视您已阅读、理解、认可并接受本产品使用说明书的全部条款和内容。使用者承诺对自己的行为因此产生的所有后果负责。使用者承诺仅处于合法目的使用本产品，并且同意本条款及浙江无我科技有限公司可能指定的任何相关政策或准则。

免责声明

- 在使用本产品的过程中，请您务必严格遵守并执行本产品使用说明书。对违反产品使用说明书所提示的使用行为或不可抗因素导致的一切人身伤害、事故、财产损失、法律纠纷，及其他一切造成利益冲突的不利事件，均由用户自行承担相关责任和损失，浙江无我科技有限公司将不承担任何责任。
- 本公司保留对产品使用说明书的最终解释权，以最新的说明书效力为准。

售后服务

产品合格证

产品名称:医用电子体温计

产品型号:LM_MED_B002

品牌商:绍兴守仁医疗健康科技有限公司

制造商:东莞市福达康实业有限公司

检 验 员: _____

检验日期: _____



产品保修卡

产品名称:医用电子体温计

产品型号:LM_MED_B002

客户名称: 购买日期:

电话:

地址:

退换货原因/故障描述:

保修政策

- 1.自您签收次日起7日内, 本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况, 经由绿萌售后服务中心检测确定, 可免费享受退货或换货服务。
- 2.自您签收次日起8至30日内, 本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况, 经由守仁售后服务中心检测确定, 可免费享受换货或维修服务。
- 3.自您签收次日起12个月内, 本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况, 经由绿萌售后服务中心检测确定, 可免费享受维修服务。

非保修条例

1. 未经授权的维修、疏忽、过度使用、进液、事故、改动、暴露暴力使用、涂改标贴以及防伪标记等
2. 已超过三包有效期
3. 因不可抗力造成的损坏
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况
5. 因人为原因导致本产品以及配件产生《产品性能故障表》所列性能障碍

产品性能故障表

1. 蓝牙连接失败
2. 其他产品质量引起的性能故障

说明书版本编号： LM_MED_B002 Rev.1.0

说明书编制日期：2020年 3月